

# Anleitung „Tagestaste“ Genius

## Wo finde ich die Tagestaste?



Wenn die Tagestaste aktiviert ist, leuchtet der gelbe Kreis.

Mit der grünen Taste wird die Tagestaste bestätigt.


## Was ist die Tagestaste?

Die Tagestaste überwacht die Aktivität unserer Kundinnen und Kunden. Wenn die Tagestaste aktiv ist, muss ein Mal pro Tag (innerhalb von 24 Stunden) der grüne Knopf am Genius gedrückt werden. Wird dies innerhalb der 24 Stunden nicht gemacht, startet das Genius alle 10 Minuten einen Beeper. Sobald die Stunde vorbei ist, wird eine Meldung (per E-Mail) an einen Angehörigen ausgelöst.

## Wie kann ich die Tagestaste aktivieren oder wieder ausschalten?

Aktivieren Sie die Tagestaste in unserem Kundencenter oder telefonisch über unsere Hotline. Für die Aktivierung im Kundencenter melden Sie sich an und wählen Sie „Notrufgeräte ändern“. Wählen Sie im anschliessenden Bildschirm „Optionen“ und schalten Sie die Tagestaste ein.

Die Funktion kann manuell ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden. Drücken Sie dafür einmalig kurz die Taste mit dem gelben Kreis. Bitte beachten Sie, dass der gelbe Kreis leuchtet, wenn die Funktion Tagestaste eingeschaltet ist.

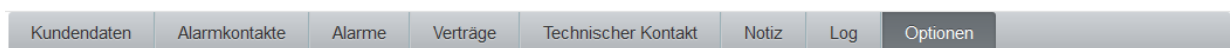

Tagestaste des Notrufgeräts ist: Ausgeschaltet

Anrufe auf Notrufgerät zulassen : Wert bitte erstmalig setzen

Anrufe aufs Notrufgerät können durch drücken der Alarmtaste am Notrufgerät oder am Handsender entgegen genommen werden.

## Wo am Notrufgerät erkenne ich, dass die Tagestaste eingeschaltet ist?

Ist die Tagestaste eingeschaltet, leuchtet der gelbe Kreis am Genius.

## Haben Sie noch weitere Fragen?

Auf unserer Hotline 0848 65 65 65 beraten wir Sie gerne täglich von 6:30 bis 20:00 Uhr.

### SmartLife Care AG

Zürichstrasse 38  
8306 Brüttsellen

Support 0848 65 65 65  
support@smartlifecare.ch