


Istruzioni „pulsante giornaliero“ Genius

Dove si trova il pulsante giornaliero?

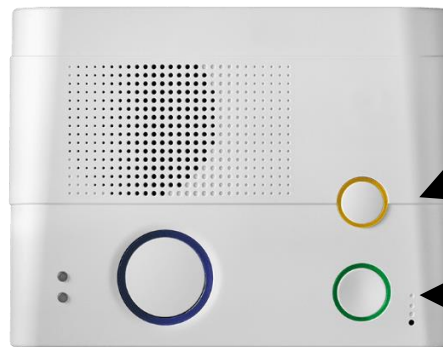

Quando il pulsante giornaliero è attivato, il cerchio giallo si illumina.


Premere il tasto verde per confermare il pulsante giornaliero.

Che cosa fa il pulsante giornaliero?

Il pulsante giornaliero monitora l'attività degli utilizzatori. Se il pulsante giornaliero (giallo) è illuminato si deve schiacciare il pulsante verde una volta al giorno (quindi ogni 24 ore). Se l'utilizzatore non schiaccia il pulsante verde ogni 24 ore, il Genius emette un suono ogni 10 minuti, per un'ora. Dopo questo periodo di tempo, una persona di contatto viene avvisata pre-mail.

Come si può attivare o disattivare il pulsante giornaliero?

L'attivazione del pulsante giornaliero può essere fatta nell'area clienti del nostro sito internet, oppure telefonicamente al numero 0848 65 65 65. Per l'attivazione nell'area clienti: accedere al conto e scegliere "Modifica dispositivi salvavita"; nella schermata seguente scegliere "Opzioni" e "Attivare il pulsante giornaliero". La funzione può essere disattivata e riattivata manualmente. Premere una volta il pulsante con il cerchio giallo. Si prega di notare che il cerchio giallo si illumina quando la funzione del "tasto giornaliero" è attivata.

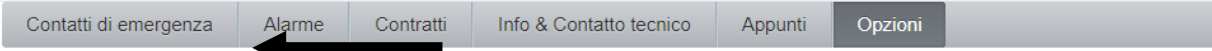

Contatti di emergenza **Alarme** Contratti Info & Contatto tecnico Appunti Opzioni

Il pulsante giornaliero dell'apparecchio salvavita è: inattivo

Permettere le chiamate sull'apparecchio salvavita : No

Le chiamate sull'apparecchio salvavita possono essere ricevute premendo il pulsante di allarme sull'apparecchio salvavita o sul trasmettitore.

Dove si vede se il pulsante giornaliero è attivo?

Se il pulsante giornaliero è attivo, il pulsante giallo del Genius è luminoso.

Avete ancora delle domande?

Siamo lieti di risponderle al numero 0848 65 65 65 ogni giorno, dalle 6.30 alle 20.00.

SmartLife Care SA

Zürichstrasse 38
8306 Brüttisellen

Support 0848 65 65 65
support@smartlifecare.ch